

Accumax



EPÍTOME DE PERFECCIÓN

Dosificador Acoplado a Frasco Accumax

Dosificador Acoplado a Frasco Accumax

Donde hay innovación, hay expertise y eso es lo que Accumax ha demostrado con su maravilloso Dosificador Acoplado a Frasco.

Diseñado después de una extensa investigación sobre los requisitos y necesidades del cliente, el dosificador acoplado a frasco tiene como objetivo satisfacer todas sus necesidades de dispensación con una precisión y comodidad inigualables.



Satisfacción garantizada

Experimente cómo se siente estar completamente satisfecho con un dispositivo diseñado y construido para ofrecer características inigualables, que hacen que usarlo sea un placer total. Fabricado con materias primas de la mejor calidad, los dosificadores acoplados a frasco de Accumax prometen años de durabilidad y ofrecen una precisión constante.




Fácil de desmontar,
limpiar y ensamblar.
Montaje inferior con
diseño mejorado.

Bloqueo de volumen.
Asegura la detención de
cualquier descarga accidental



El mecanismo único del
pistón permite la limpieza y
mantenimiento del cilindro de
este, sin alterar la calibración

El dispositivo viene con
4 adaptadores adicionales para los
tamaños de botella más comunes.
Para una mayor comodidad

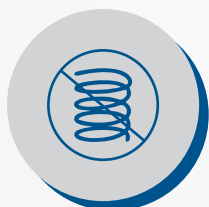

El diseño de válvula sin resorte
ofrece una alta resistencia química
y una vida útil más larga con un
mantenimiento mínimo


Tubo de llenado telescópico
versátil, compatible con diferentes
tamaños de botellas de reactivo
de 170 MM a 300 MM



Los tubos de descarga con
válvula de recirculación eliminan
la pérdida de muestra y conservan
preciosos reactivos.

Una forma superior de trabajar

Al mismo tiempo que garantiza una precisión impecable, el dosificador acoplado a frasco de Accumax también está diseñado para ofrecer una experiencia de usuario superior, lo cual hace que el dispositivo sea extremadamente fácil y conveniente de usar. Por lo tanto, el secreto detrás de su gran popularidad es su gran facilidad de uso gracias a sus características altamente efectivas.

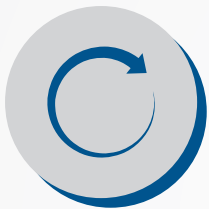

Tubo de descarga con rotación de 360 °, hace que la dispensación en múltiples recipientes sea conveniente

Diseño ergonómico con movimiento suave para un muestreo conveniente y dispensación de baja presión.



Las marcas de graduación dobles permiten una configuración precisa del volumen y una visibilidad clara desde ambos lados.

Montaje a presión del tubo de descarga para una instalación sin complicaciones



El dispositivo es fácil de recalibrar con una sola herramienta.

La función de bloqueo de seguridad evita el flujo accidental de reactivos



Calibrado según el estándar ISO 8655 en un laboratorio acreditado según el estándar ISO 17025. Cada dispensador viene con un informe de calibración individual.

Información sobre pedidos

Accumax Bottle Top Dispenser Technical Specifications

Catalog No. With Re-circulation	Catalog No. Without Re-circulation	Volume Range ml	Increment ml	Inaccuracy ($\pm$) %	Inaccuracy ($\pm$) ml	Imprecision ($\pm$) %	Imprecision ($\pm$) ml
ADR - 2.5	AD - 2.5	0.25 to 2.5	0.05	0.6	0.015	0.2	0.005
ADR - 05	AD - 05	0.5 to 5	0.1	0.5	0.025	0.2	0.01
ADR - 10	AD - 10	1 to 10	0.2	0.5	0.05	0.2	0.02
ADR - 25	AD - 25	2.5 to 25	0.5	0.5	0.125	0.2	0.05
ADR - 30	AD - 30	2.5 to 30	0.5	0.5	0.15	0.2	0.06
ADR - 50	AD - 50	5 to 50	1.0	0.5	0.25	0.2	0.1
ADR - 60	AD - 60	5 to 60	1.0	0.5	0.3	0.2	0.12
ADR - 100	AD - 100	10 to 100	2.0	0.5	0.5	0.2	0.2

Accessories

Description	Cat#	Color
Bottle Cap 28mm	ADA-01	
Bottle Cap 38mm	ADA-02	
Bottle Cap 40mm	ADA-03	
Bottle Cap 45mm	ADA-04	
Calibration Tool	ADA-05	
Recirculation Tube	ADA-06	
Telescopic Fill Tube 2.5-60ml	ADA-07	

Accumax

Accumax Lab Devices Pvt. Ltd.
www.accumaximum.com



ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.